


QUICK START – OPERATING YOUR OXYGEN CONCENTRATOR

DANGER-NO SMOKING

 Read the Important Safeguards and observe all Warnings and Cautions on the product and in the Instruction Guide. Follow all operating instructions. Refer to Operation section for more details.

1A OR 1B. Attach the appropriate oxygen accessories to the oxygen outlet. If cannula isn't attached to oxygen tubing, follow manufacturer's instructions to attach.

2. With power switch OFF, firmly attach cord to unit and plug into wall outlet.




1A. Oxygen Tubing Connection: Thread oxygen outlet connector onto oxygen outlet and attach tubing to the connector.



1B. Oxygen Tubing Connection With Humidification: Fill humidifier bottle, thread humidifier bottle wing nut onto oxygen outlet and tighten securely. Attach tubing to humidifier bottle outlet fitting.



Ensure power cord is fully inserted into concentrator IEC connector.

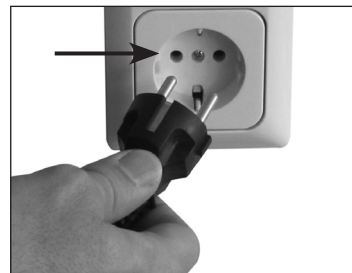

Plug concentrator cord into wall outlet.

3. Press Power Switch to turn unit ON.



NOTE– When first turned ON, all LEDs illuminate briefly and alarm briefly sounds to test system.

4. Ensure flow meter is set to prescribed flow rate.




NOTE–Flow meter ball should be centered on line next to prescribed flow rate.

5. Attach cannula to nose and face. Breathe normally through cannula.




NOTE– Unit operates in “start-up” mode with Startup Low O2 LED illuminated for up to 15 minutes until proper output flow is achieved when Green Good O2 LED illuminates.

6. When finished using the device, press Power Switch to turn unit OFF.

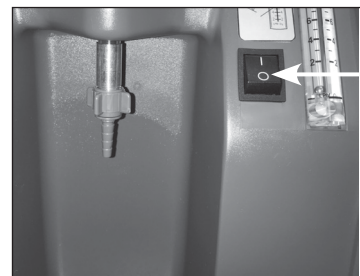

DANGER– Do not leave cannula on bed coverings or chair cushions if unit is turned ON but not in use, the oxygen will make the materials flammable. Turn concentrator OFF when not in use to prevent oxygen enrichment.

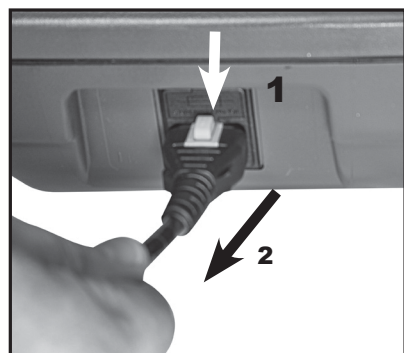

7. To remove the line cord:
a. Press the yellow release tab
b. Pull the plug while holding the release tab



Video instruction on unit set up



Video instruction on unit operation

INICIO RÁPIDO – CÓMO HACER FUNCIONAR EL CONCENTRADOR DE OXÍGENO



! Lea las Precauciones importantes y observe todas las Advertencias y Precauciones en el producto y en la Guía de instrucciones. Siga todas las instrucciones de funcionamiento. Consulte la sección Funcionamiento para obtener más detalles.

1A O 1B. Conecte los accesorios de oxígeno adecuados al puerto de salida de oxígeno. Si la cánula no está conectada al tubo de oxígeno, siga las instrucciones del fabricante para conectarla.



1A. Conexión del tubo de oxígeno: Enrosque el conector de salida de oxígeno en la salida de oxígeno y conecte el tubo al conector.




1B. Conexión del tubo de oxígeno con humidificación: Llene la botella para el humidificador, enrosque la tuerca de mariposa de la botella en la salida de oxígeno y ajuste bien. Conecte el tubo al accesorio de salida de la botella para el humidificador.

2. Con el interruptor de encendido APAGADO, conecte el cable a la unidad con firmeza y enchúfelo a un tomacorriente de pared.



Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien insertado en el conector IEC del concentrador.

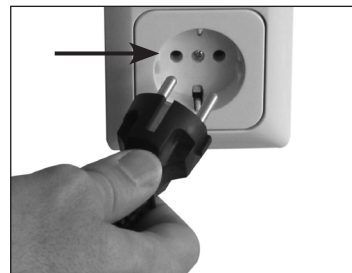

Enchufe el cable del concentrador en el tomacorriente de pared.

3. Presione el interruptor de encendido para encender la unidad.



! **NOTA:** Cuando se enciende por primera vez, todas las luces LED se encienden y suena la alarma por unos segundos para probar el sistema.

4. Asegúrese de que el medidor de flujo esté configurado en la tasa de flujo que se le prescribió.




! **NOTA:** La esfera del medidor de flujo debe estar centrada en la línea junto a la tasa de flujo que se prescribió.

5. Coloque la cánula en la nariz y cara. Respire con normalidad a través de la cánula.




! **NOTA:** La unidad funciona en modo de arranque con la luz LED de nivel de oxígeno bajo en el arranque encendida por un máximo de 15 minutos, hasta que se alcanza el flujo de salida adecuado (se enciende la luz LED verde de nivel de oxígeno adecuado).

6. Cuando deje de usar el dispositivo, presione el interruptor de encendido para apagar la unidad.

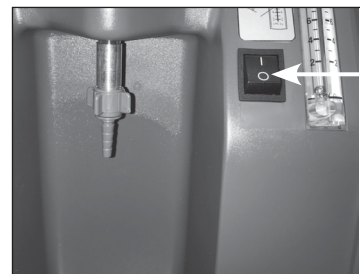

! **PELIGRO:** No deje la cánula sobre acolchados ni cojines de silla si la unidad está encendida, pero no está en uso, ya que el oxígeno podría provocar el incendio de los materiales. Apague el concentrador cuando no lo esté utilizando para evitar la sobreoxigenación.

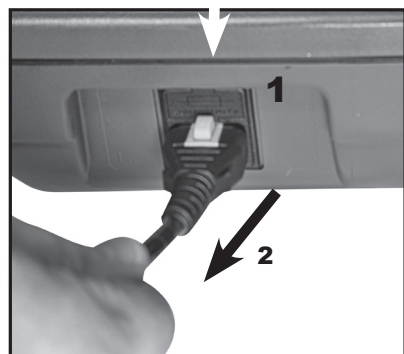

7. Para retirar el cable de alimentación, siga estos pasos:
a. Presione la lengüeta amarilla.
b. Tire del enchufe mientras sostiene la lengüeta.



Instrucción en video sobre la configuración de la unidad




Instrucción en video sobre el funcionamiento de la unidad

! / ! **DANGER - INTERDICTION DE FUMER**

! Lisez les consignes de sécurité importantes et respectez tous les avertissements et mises en garde figurant sur le produit et dans le guide d'instructions. Suivez toutes les instructions d'utilisation. Veuillez vous reporter au chapitre Utilisation pour plus de détails.

1A OU 1B. Fixez les accessoires d'oxygène appropriés au raccord de sortie d'oxygène. Si la canule n'est pas fixée à la tubulure d'oxygène, suivez les instructions du fabricant pour la fixer.

2. L'interrupteur d'alimentation ÉTANT ÉTEINT, fixez fermement le câble à l'appareil et branchez-le dans une prise murale.

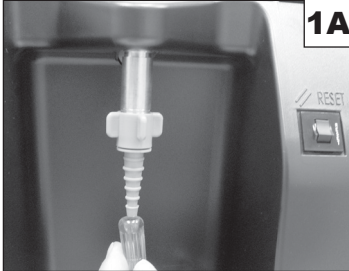


1A. Connexion du tuyau d'oxygène : Vissez le connecteur de sortie d'oxygène sur la sortie d'oxygène et fixez le tuyau au connecteur.



1B. Raccordement du tube d'oxygène avec humidification : Remplissez la bouteille de l'humidificateur, vissez l'écrou à oreilles de la bouteille de l'humidificateur sur la sortie d'oxygène et serrez fermement. Fixez le tuyau au raccord de sortie de la bouteille de l'humidificateur.



Assurez-vous que le câble d'alimentation est complètement inséré dans le connecteur CEI du concentrateur.

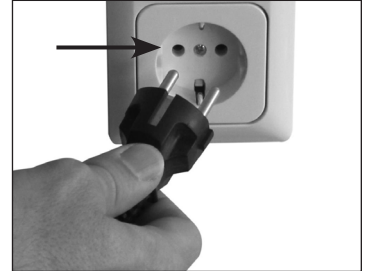

Branchez le câble d'alimentation du concentrateur à une prise murale.

3. Appuyez sur l'interrupteur pour mettre l'unité sous tension.

4. Assurez-vous que le débitmètre est réglé sur le débit prescrit.

5. Fixez la canule au nez et sur la face. Respirez normalement dans la canule.

6. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour ÉTEINDRE l'appareil.




! **REMARQUE :** lors de la première mise SOUS TENSION, toutes les voyants s'allument brièvement et l'alarme retentit brièvement pour tester le système.




! **REMARQUE :** la bille du débitmètre doit être centrée sur la ligne à côté du débit prescrit.



! **REMARQUE :** l'appareil fonctionne en mode « démarrage » avec le voyant Startup Low O2 allumé pendant 15 minutes jusqu'à ce que le débit de sortie correct soit atteint lorsque le voyant Green Good O2 s'allume.

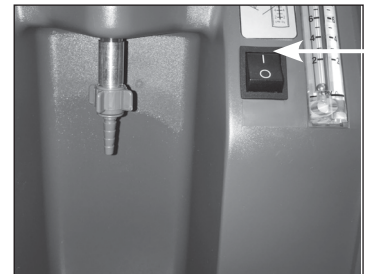

! **DANGER :** Ne laissez pas la canule sur les couvre-lits ou les coussins de sièges si l'unité est allumée, mais n'est pas utilisée, car l'oxygène rendrait les matériaux inflammables. Éteignez le concentrateur lorsqu'il est inutilisé pour éviter l'enrichissement en oxygène.

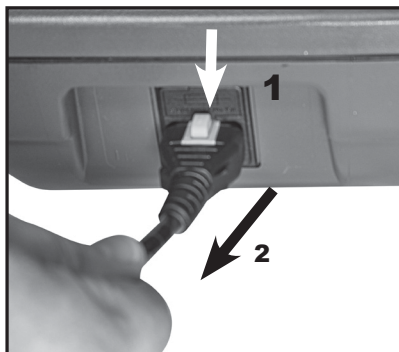

7. Pour retirer le câble d'alimentation :
 a. appuyez sur la languette de déverrouillage jaune
 b. tirez sur la fiche tout en maintenant la languette de dégagement



Instructions vidéo sur la mise en place de l'unité



Instructions vidéo sur le fonctionnement de l'unité